

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: Máscara cirúrgica descartável

Ref: SKEPMR200

Imagem produto:



DESCRIÇÃO:

Máscara descartável para proteção do rosto. Com três dobras e fixação nas orelhas através de elástico, com suporte para o nariz integrado (clipe nasal de fácil ajuste). Não estéril.

EMBALAGEM:

Apresentação: embalagens de 50 unidades.

Tamanho : único


Cor : Azul



BLOK

**SAFETY &
INDUSTRIAL
EQUIPMENTS**

ESPECIFICAÇÕES DAS MEDIDAS:

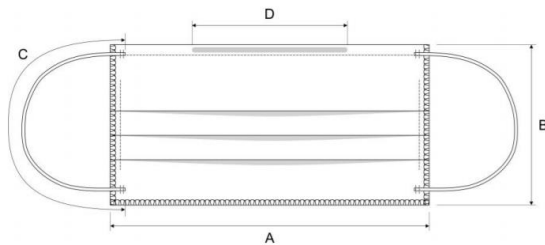

| Parâmetros vs tamanhos [cm] | | TU |
|-----------------------------|----------------------------|---------|
| A | Comprimento | 17,5-20 |
| B | Altura com pregas fechadas | 9,5-11 |
| C | Comprimento do elástico | 14-17 |
| D | Comprimento do clipe nasal | 9-12 |

Hipoalergénica;

Alta capacidade de filtração.

Capacidade de Retenção de Partículas (PRC) = PRC (superior ou igual a 3 µm) ≥ 95%

MANUSEAMENTO:

A máscara descartável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara:

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- b) Colocação da máscara descartável com a face interna virado para a cara, e a face externa virado para fora;
- c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida;
- f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;
- g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
- h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos adequado;



Certificate of Compliance



No. 042004035 WOLDN13

Technical Construction File no. XMT0202001406LY/PPE

Certificate's Holder: Wuchuan Dongkang Labor Protection products Co., Ltd
No.58 Tangfu Village, Tanba Town, Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province



Product: Disposable protective mask
Model(s): D-1
Verification to: Standard: EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products, RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 03 April 2020

Expiry date: 02 April 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it